

## MASAJEADOR FACIAL CON CALOR

Este masajeador facial con calor está diseñado para complementar la rutina diaria de cuidado de la piel mediante una combinación de calor suave y masaje por vibración. Su acción ayuda a relajar los músculos del rostro, estimular la circulación y proporcionar una agradable sensación de bienestar.



### CARACTERÍSTICAS

Gracias a su diseño compacto y portátil, es ideal para utilizar en casa, la oficina o durante los viajes, contribuyendo a que la piel luzca más fresca, descansada y revitalizada con un uso constante.

#### **Relaja los músculos del rostro**

Ayuda a aliviar la tensión acumulada en la frente, mandíbula y mejillas. Proporciona una sensación de relajación después de un día de trabajo.

#### **Favorece la circulación sanguínea**

El masaje estimula la microcirculación.

Puede aportar una apariencia más fresca y luminosa a la piel.

#### **El calor brinda mayor confort**

El calor suave ayuda a relajar la piel.

Puede favorecer una mejor penetración de los productos cosméticos y aumentar la sensación de bienestar.

### INCLUYE



### ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO


1. Masajeador facial con calor
2. Correa de seguridad
3. Cable cargador tipo C
4. Manual de instrucciones

#### Colores disponibles

- Blanco
- Negro

## PRESENTACIÓN

1. Cabezal de masaje calor
2. Pantalla Digital
3. Botón de encendido/ modo
4. Correa de seguridad
5. Puerto de carga tipo C

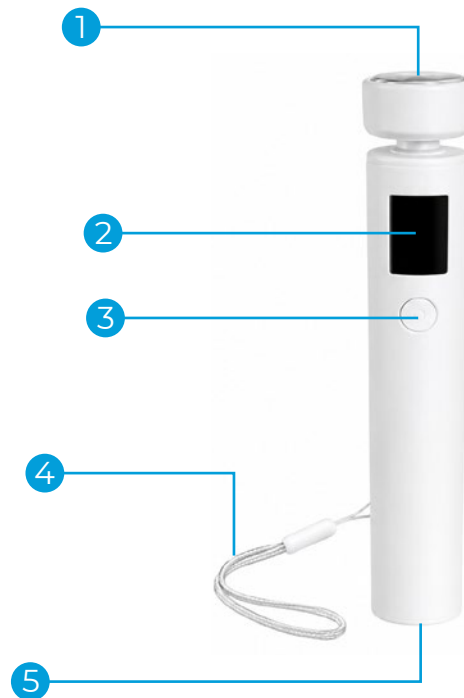

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Tamaño            | 20 x 20 x 118 mm |
| Potencia nominal  | 3W               |
| Capacidad batería | 3.7 V - 260 mAh  |
| Voltaje de carga  | 5V               |
| Peso              | 30 g             |
| Puerto de carga   | Usb tipo C       |

## INSTRUCCIONES DE USO

Presione brevemente el botón de encendido. La pantalla mostrará A y entrará en el primer modo. Continúe presionando brevemente el botón de encendido para cambiar de modo. El dispositivo cuenta con un total de 3 modos:

- 1.er modo: La pantalla muestra A, temperatura de 45 °C, vibración activada y un tiempo de funcionamiento de un minuto.

- 2.º modo: La pantalla muestra B, temperatura de 50 °C, vibración activada y un tiempo de funcionamiento de un minuto.

- 3.er modo: La pantalla muestra C, temperatura de 55 °C, vibración activada y un tiempo de funcionamiento de un minuto.

**Nota:** El tiempo de funcionamiento predeterminado del dispositivo para aliviar es de un minuto y se apagará automáticamente después de este tiempo.

## UTILICE EL DISPOSITIVO DE LA SIGUIENTE MANERA:

- Encienda el dispositivo para aliviar las picaduras de insectos y seleccione el modo deseado.
- Presione el cabezal de masaje caliente sobre la zona de la picadura durante un minuto.
- Cuando el dispositivo deje de funcionar, retírelo de la piel.

# PRESENTACIÓN

---

## CARGA DEL DISPOSITIVO

Si va a utilizar el dispositivo por primera vez o no lo ha utilizado durante un período prolongado, cárguelo siguiendo las siguientes instrucciones:

- Conecte el cable USB incluido al puerto de carga ubicado en la parte inferior izquierda del dispositivo.
- Conecte el cable USB a un adaptador de corriente y enchúfelo a la toma de energía.

### Cable USB (Tipo C)

- Cuando comience la carga, la luz blanca ubicada sobre el botón del dispositivo parpadeará.
- El dispositivo tarda aproximadamente 90 minutos en cargarse completamente. Una vez finalizada la carga, las cuatro luces ubicadas sobre el botón permanecerán encendidas y se apagarán después de aproximadamente 3 minutos. Se recomienda desconectar el dispositivo de la corriente una vez haya finalizado la carga.

Nota: No utilice este dispositivo mientras se está cargando..