

Agujas APS

Especialmente diseñadas para punción seca



¿Qué es la punción seca?

Técnica de Fisioterapia invasiva que consiste en la inserción de agujas sin inyectar ninguna sustancia, para provocar un estímulo mecánico en el tejido diana. Su uso principal es en el Síndrome de Dolor Miofascial (SDM). Este síndrome es el conjunto de signos y síntomas causados por los punto gatillo miofasciales (PGM).



¿Qué es un punto gatillo miofascial?

Un PGM es una zona hiperirritable con un nódulo palpable que se encuentra dentro de una banda tensa. Es doloroso a la presión y puede causar dolor referido. Su correcto diagnóstico es muy importante para ser efectivo y hay ciertos criterios para detectarlos: Reconocimiento la banda tensa, nódulo con dolor local exquisito a la presión, apreciación del dolor habitual del paciente a la presión y limitación dolorosa al estiramiento máximo.

¿Qué es la electropunción seca?

Aplicación de corriente eléctrica mediante agujas, insertadas en los PGM o zonas dolorosas, con la finalidad de estimular dichos PGM o zona afectada.



Tipos de punción seca:

Clasificación según la profundidad de inserción de la herramienta:

- Punción seca superficial (PSS): Aguja no llega al PGM.
- Punción seca profunda (PSP): Aguja llega al PGM.



Técnicas utilizadas

Las técnicas más utilizadas son la técnica superficial de Baldry combinada con la técnica de giros y la técnica de entradas y salidas rápidas de Hong. La técnica superficial consiste en insertar la aguja en la zona subyacente del PGM, para después poder manipularla. La técnica profunda consiste en insertar la aguja para atravesar el PGM y provocar una REL. A partir de esta situación, se tienen que hacer entradas y salidas rápidas, hasta que el paciente no lo tolere más o se acaben las REL, buscando angulaciones.



Efectividad

Su eficacia esta demostrada en: síndrome subacromial crónico, capsulitis adhesivas, fasciosis plantar, dolor lumbar, epicondilitis lateral, dolor cervical crónico, cefaleas tensionales y migrañas, disfunciones temporomandibulares, cicatrices quirúrgicas, etc.



¿Qué es la acupuntura?

Técnica originaria de la medicina tradicional China (MTC), que consiste en la inserción de agujas en determinados puntos descritos en todo el cuerpo, provocando estímulos en los tejidos diana para restablecer el equilibrio energético (Qi) y recuperar el estado de salud de la persona.



Técnicas utilizadas

En la mayoría de técnicas la aguja no sobrepasa 1 cm de profundidad. Las técnicas más utilizadas son la punción con giro y la de picoteo. La punción con giro, consiste en la inserción de la aguja mientras se hace girar. El picoteo, consiste en hacer una inserción de la aguja hasta el punto a tratar, y luego hacer varias entradas y salidas de corto recorrido.



Acupuntura (AC) vs Punción seca (PS)

- Objetivo
- AC más superficial que la PS (en general)
 - Técnica de inserción
 - Sensación de la aguja
 - Cabeza

Agujas APS

Necesidad de diseñar agujas específicas para las técnicas de punción seca.



Características de las APS

Fabricadas con acero inoxidable AISI 304H, tanto en el mango como en el cuerpo.



Características de las APS

También el diseño especial de la punta, nos permite unas inserciones mucho más limpias, evitando así un deterioro rápido del afilado y el consiguiente funcionamiento más doloroso y poco fluido.



Acupuntura

Punción seca

Características de las APS

Su cuerpo, con un pulido y lubricado exclusivos, consigue una mejor realización de la técnica de múltiples inserciones, evitando un dolor y una agresión innecesarios en el tejido diana, a diferencia de las agujas de acupuntura tradicionales.



Características de las APS

Este cuerpo cuenta con la flexibilidad óptima para poder realizar la técnica en todas las direcciones que convenga sin que la aguja se doble o rompa.



Características de las APS

También cuenta con un mango sin cabeza, flexible y extralargo, difiriendo aquí también de las agujas de acupuntura, para tener un agarre óptimo y poder realizar la técnica de entradas y salidas rápidas y unas inserciones mucho más acuradas.




Acupuntura



Punción seca

Características de las APS

La aguja viene con un tubo guía, en el que se deja espacio para poder apoyar la cánula en la piel y que sobresalga el mango para poder hacer la técnica de impulso eficazmente. En muchos casos, en las agujas de acupuntura tradicionales no se encuentra disponible, debido a las diferencias en la técnica de impulso.

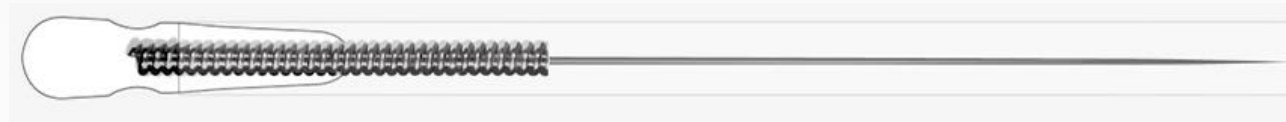

Características de las APS

Al ser fabricadas en acero inoxidable, tanto en el mango como en el cuerpo, toda su superficie es conductora y se van a poder realizar tratamientos de electroterapia.



Otras características


- Codificación por colores.
 - Envase individual
- Cajas de 100 unidades (con alguna excepción).



Tipos de APS

REGULAR



- Punta cónica para evitar el deterioro de la aguja.
- Lubricación y pulido específico que minimizan el dolor y los daños innecesarios en el tejido.
- Mango sin cabeza, flexible y extralargo.
- Flexibilidad óptima.

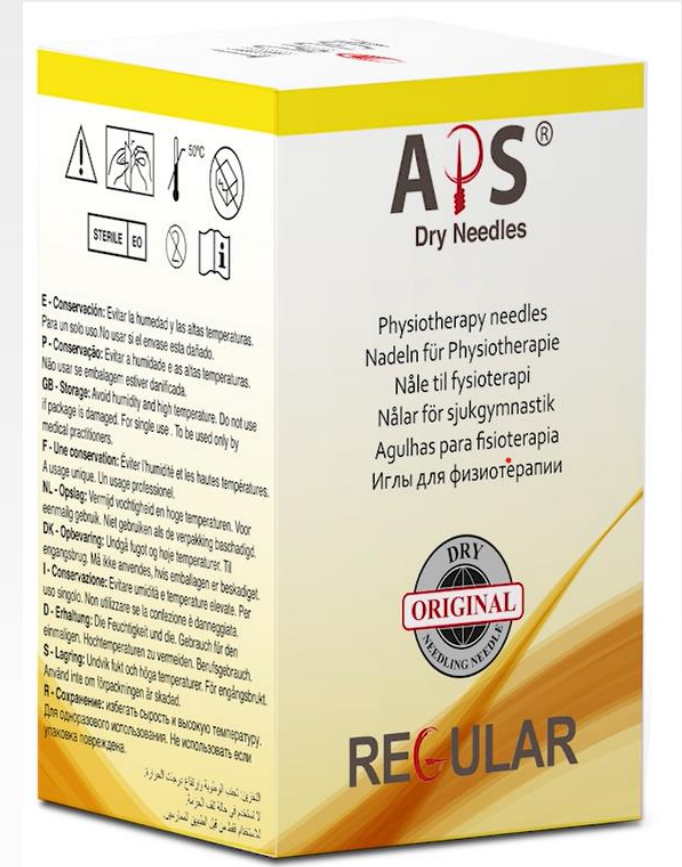

Tipos de APS

SUPERFICIAL / FASCIA



- Punta conica para evitar el deterioro de la aguja.
- Mango sin cabeza, flexible y extralargo.
- Flexibilidad óptima
- Con una lubricación y un pulido especialmente diseñados para tratamientos superficiales.

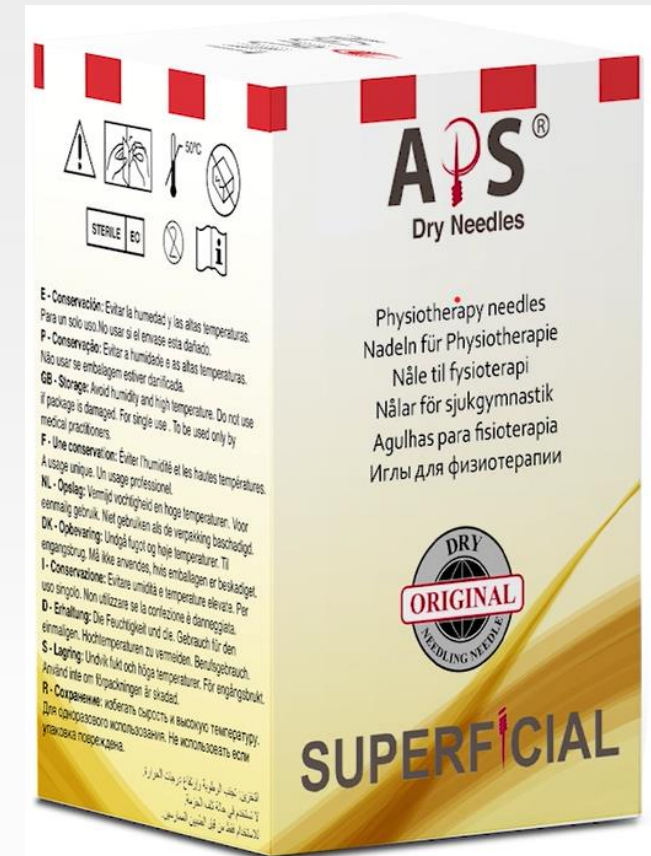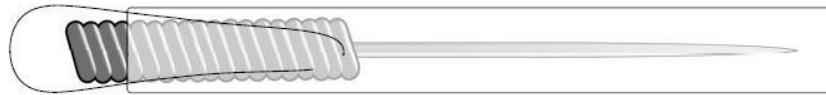

Tipos de APS

CLICK



- Punta cónica para evitar el deterioro de la aguja.
- Mango sin cabeza, flexible y extralargo.
- Lubricación y pulido específico que minimizan el dolor y los daños innecesarios en el tejido.
- Flexibilidad óptima
- Aguja sujeta al tubo sin necesidad de residuos ni productos químicos.
- Manejabilidad más ágil, permitiendo hacer la inserción con una mano.
- Permite la sujeción de la aguja de nuevo al tubo, en caso de ser necesario.

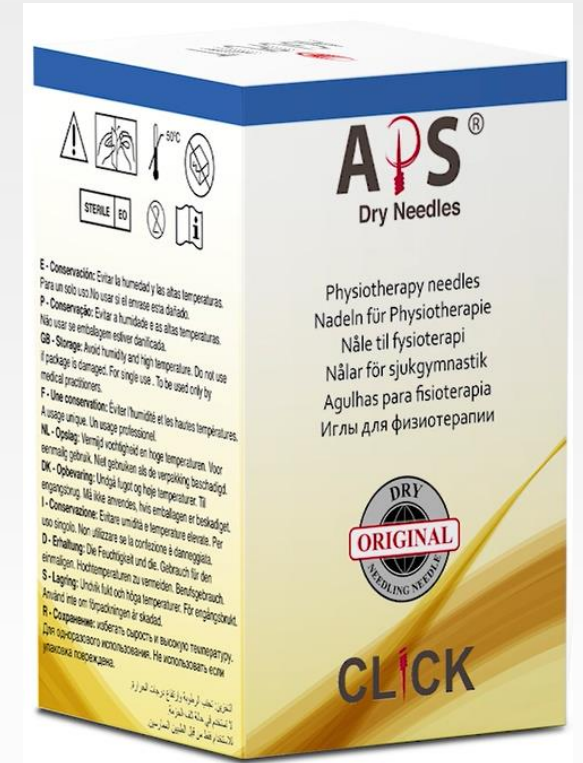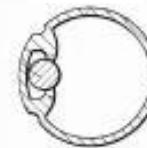

Tipos de APS

SAFETY TUBE


- Punta cónica para evitar el deterioro de la aguja.
- Mango sin cabeza, flexible y extralargo.
- Lubricación y pulido específico que minimizan el dolor y los daños innecesarios en el tejido.
- Flexibilidad óptima
- Doble tubo guía, rígido + flexible, que mejora la precisión.
- Evita el contacto directo con el cuerpo de la aguja para mejorar la asepsia y para prevenir el deterioro del lubricante.

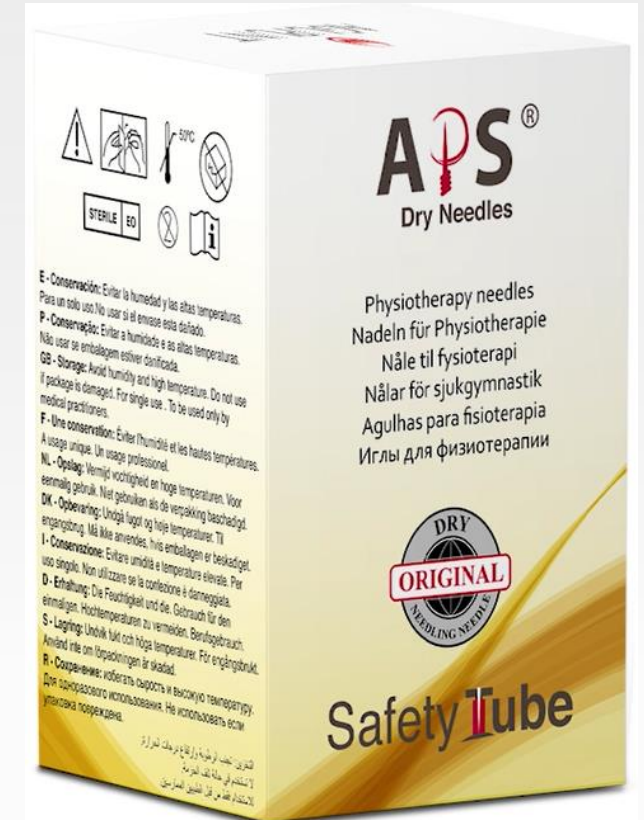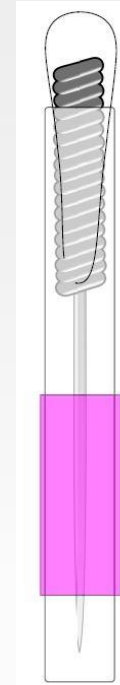

Tipos de APS

IPEN

- Punta cónica para evitar el deterioro de la aguja.
- Mango sin cabeza, flexible y extralargo.
- Flexibilidad óptima.
- Con una lubricación y un pulido especialmente diseñados para electroterapia.
- Disponible con guía o sin guía.

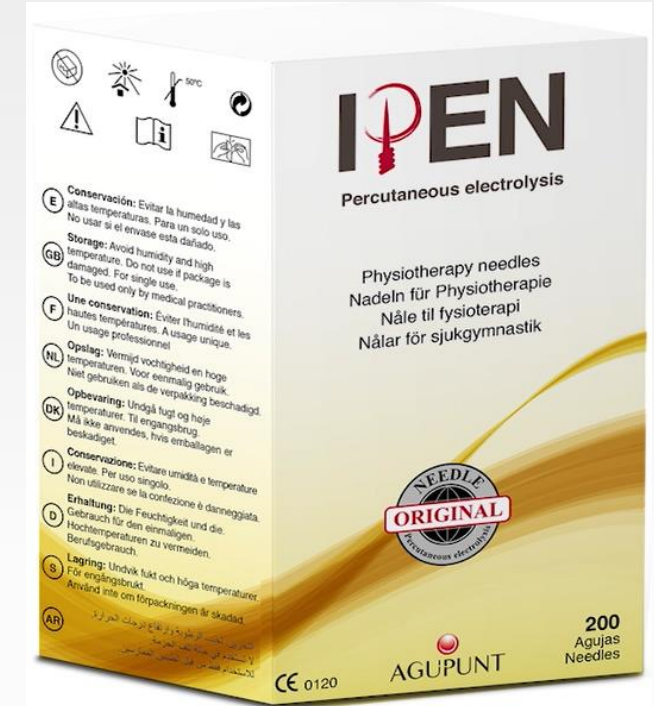

Cuadro de referencias

Tamaño	Color	Regular	Click	Safety Tube	Electroterapia		Superficial Fascia
0.16x13							A1037PS
0.16x25		A1037BP	A1037BPC		A1007DE* A1008CE*		
0.16x30							
0.16x40							
0.18x25							A1038PS
0.20x30		A1044P	A1044PC		A1008BE* A1009E*	A1008BET A1009ET	
0.25x13		A1037P	A1037PC				
0.25x25		A1038P	A1038PC				
0.25x30		A1043P	A1043PC				
0.25x40		A1042P	A1042PC				A1042PS
0.30x30		A1045P	A1045PC				A1045PS
0.30x30							
0.30x40		A1040P	A1040PC				A1040PS
0.30x50		A1042BP	A1042BPC				A1042BPS
0.30x60		A1042CP	A1042CPC	A1042CP-T			
0.30x70		A1012P			A1008AE* A1009BE*		
0.30x75		A1010P	A1010PC	A1010P-T			
0.30x100		A1047P	A1047PC	A1047P-T			
0.30x125		A1049P		A1049P-T			
0.32x30							
0.32x40		A1041P	A1041PC				
0.35x100				A1048P-T			
0.35x125				A1050P-T			
0.40x125				A1051P-T			
MIX BOX		A1046P					

*Sin tubo guía.

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

